

饱和油红O染色液

产品货号: R23241

产品规格: 2×50ml/2×100ml

产品简介:

油红O属于偶氮染料,是很强的脂溶剂和染脂剂,与甘油三脂结合呈小脂滴状。脂溶性染料能溶于组织和细胞中的脂类,它在脂类中的溶解度比在溶剂中大。当组织切片置入染液时,染料则离开染液而溶于组织内的脂质(如脂滴)中,使组织内的脂滴呈橘黄至红色,具体视脂质浓度而定。用于分析细胞样品中脂质状况,在淀粉凝胶电泳中作类脂和脂肪染色。

产品组成:

产品名称	2×50ml	2×100ml	保存温度
试剂A	50ml	100ml	室温
试剂B	50ml	100ml	室温,避光

实验前说明:

1. 要先做预实验,掌握基本操作。
2. 提前制备甲醛-钙固定液、苏木素、甘油明胶。
3. 石蜡切片不可用于脂肪染色,如果做脂肪组织冷冻切片,冷冻温度比普通要低,切片厚度加厚。

过程说明:

1. 油红O工作液制备:

饱和油红O染液与蒸馏水按5:2比例稀释,过滤后2h内使用。

2. 样品处理:

对于冰冻切片:蒸馏水5min。


对于培养细胞: -20℃ 30min,甲醛-钙固定液固定5min。

蒸馏水洗涤2min,再换缸进行第二次洗涤。

3. 染色,接以上步骤:

- 1) 冷冻切片在试剂A中洗30s~1min,入油红O工作液染液37℃ 30min,避光,密封,具体时间要根据玻片情况调整。
- 2) 如果效果不好,染色时温度提高到42~60℃。
- 3) 试剂A分色至背景无色。
- 4) 苏木素复染(1min以内),PBS返蓝。
- 5) 甘油明胶封片(水溶性封片剂)。

染色结果:

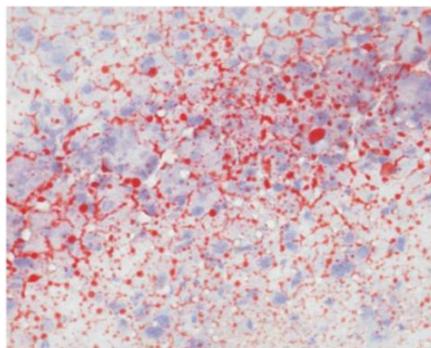

肝组织×400

结果判定: 中性脂肪呈红色或橙红色,胞核蓝色。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com